

วิธีใช้ Puregon Pen®




มีองค์ประกอบสองส่วนสำคัญที่ท่านต้องทราบ:

1. การใส่จากหลอดลงปากกา
2. การฉีด Puregon




วิธีเตรียมการเพื่อฉีดยา:

1. จับปากกาแยกออกจากกัน
2. ใส่หลอดบรรจุยาแล้วขันปิดปากกา
3. ใส่เข็มฉีดยาให้แน่นแล้วถอดปลอกที่ปลายเข็มออก
4. หากยาไม่หยดออกจากปลายเข็ม ให้หมุนเกลียวบิดเพื่อปรับปริมาณยาหนึ่งคลิกแล้วกดที่ปุ่มฉีดยา
5. ตั้งขนาดยาตามข้อแนะนำด้วยการหมุนปุ่มบิดเพื่อปรับปริมาณยาทวนเข็มนาฬิกา
6. หากท่านหมุนปุ่มบิดเพื่อปรับปริมาณยา (IU) เกินกว่าจุดที่แนะนำโดยไม่ตั้งใจ ก็ไม่ต้องหมุนปุ่มกลับ แต่ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาต่อไปจนกว่าจะสุด
7. จากนั้นกดปุ่มฉีดยาให้สุดแล้วหมุนปุ่มบิดเพื่อปรับปริมาณยาไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง วิธีนี้จะทำให้คุณไม่เสียยา

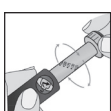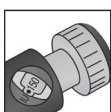
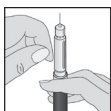


วิธีฉีดยา:

ฉีดยา Puregon เข้าใต้ผิวหนังที่ช่องท้องบริเวณใต้สะดือ

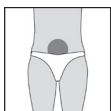

1. อย่าฉีดที่จุดเดียวกันทุกครั้ง แต่ให้กระจายไปทั่วๆ บริเวณนั้น
2. ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ดึงผิวหนังบริเวณที่จะฉีดยาขึ้นมา แล้วใช้อีกมือปักเข็มลงท่ามุม 90 องศา กดปุ่มฉีดยาจนหมดเข็ม แล้วรอประมาณห้าวินาที
3. จากนั้นถอดเข็มออกจากหลอดฉีดยาโดยใช้ปลอกสวมเข็มที่ใหม่มา แล้วนำไปทิ้งตามคำแนะนำที่ได้รับจากคลินิก หากท่านฉีดยาครบตามปริมาณแล้ว ควรจะเห็น '0' ที่ช่องแสดงปริมาณยา

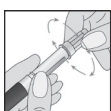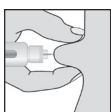

การเปลี่ยนหลอดบรรจุยา:

หากท่านเห็นว่าในหลอดมียาไม่พอ ไม่ว่าจะก่อนหรือขณะฉีดยาก็ดำเนินการตาม ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้สองทาง:

1. ท่านสามารถโยนหลอดบรรจุยาเก่าทิ้ง ใส่หลอดใหม่ แล้วฉีด
2. ท่านสามารถฉีดยาที่เหลืออยู่ในหลอดเก่าจนหมด แล้วฉีดส่วนที่ยังขาดจากหลอดใหม่

ติดต่อแพทย์หรือพยาบาล หากท่านไม่แน่ใจกับวิธีฉีดยา! จงจำไว้ว่าปริมาณยาในหลอดอาจมีมากกว่าที่ระบุไว้บนกล่องเล็กน้อย ท่านไม่จำเป็นต้องดูว่ามียาเหลืออยู่ในหลอดน้อยก่อนจะฉีดเสร็จเพราะที่ช่องแสดงปริมาณยาจะบอกว่ายายังขาดอีกเท่าไร

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- Puregon Pen อาจใช้เฉพาะสำหรับรักษาคนเพียงรายเดียวเท่านั้น
- Puregon Pen อาจใช้ได้กับหลอดบรรจุยา Puregon เท่านั้น
- เก็บปากกาฉีดยาพร้อมหลอดบรรจุยาไว้ในตู้เย็น (+2 - +8° C) หรือในท้องที่มีอุณหภูมิปกติ (ไม่เกิน +25° C) ได้อย่างมากไม่เกิน 3 เดือน